

CHIRURGIEN
DENTISTE

LABORATOIRE

SPECIALISTE

PROTHÈSE

BROCHURE

Genios®

DENTSPLY
DeguDent



For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire

Genios®P Postérieures

- Basées sur le concept d'occlusion biomécanique, elles peuvent être montées « dent contre dent » ou « dent contre deux dents » dans le cas de prothèse partielle ou totale.
- Disponibles en version « standard », pour les crêtes alvéolaires très atrophiées et en version « réduite R » pour les prothèses partielles ou pour les cas où l'espace disponible est limité.
- Pour les prémolaires, il existe une forme plus volumineuse : XL pour la version « standard » et XR pour la version « réduite R ».



Version « réduite R »



Version « standard »



Genios® A Antérieures


- Aspect naturel par leur texture de surface et leur stratification : 5 zones de teintes dégradées.
- Se caractérisent par leur brillance et leurs formes.
- Forme proximale avec un design spécifique empêchant les trous noirs au niveau des espaces inter-dentaires.

Structure IPN®

(interpenetrated polymer network : réseau de polymères interpénétrés)

- Bonne liaison chimique entre la dent et la résine de base.¹
- Stabilité durable de la teinte.¹
- Résistance à l'abrasion et aux fissures.^{2,3}

interconnexion des chaînes primaires

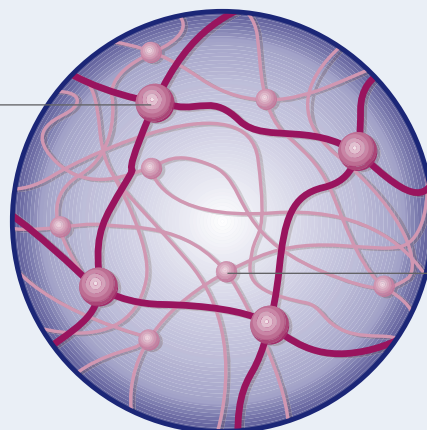

interconnexion des chaînes secondaires

Une structure homogène en trois dimensions,
avec interconnexion des chaînes moléculaires
(primaires et secondaires).

1. Spécification du produit conforme à la norme ISO 22112.

2. R.E. Ogle, DDS., L.J. David, D.C.D., H.R. Ortman, D.D.S., "Clinical wear study of a New Tooth Material: Part II", The Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 54, N° 1 (July 1985): 67-75. Statistically significant at the 95% confidence level.

3. W.H. Douglas, BDS, MS, PhD, R. Delong, D.D.S., PhD, M.R. Plintado, MPH, "Wear rates of Artificial Denture Teeth Opposed by Natural Dentition," The Journal of Clinical Dentistry, Vol. IV, N° 2 (1993): 43-47. Statistically significant at the 95% confidence level.

Prothèses partielles/combinées



Prothèses hybrides/implantoportées



Prothèses complètes



La gamme Genios® contient 17 formes antérieures du haut, 10 formes antérieures du bas et 3 formes postérieures du bas en version classique (standard ou réduite) avec une variante plus volumineuse (standard XL ou réduite XR) en 16 teintes Vita* (A1-D4) et 2 teintes Bleach (BL1 et BL3).

12 nouvelles formes de dents dans le secteur antérieur

Faces linguales et palatines

- Faces plus volumineuses permettant la réalisation des prothèses combinées, celles avec attachements ou avec couronnes télescopiques.
- Utilisable aussi pour la prothèse hybride/implanto-portée.




* N'est pas une marque déposée par DENTSPLY International Corp.

Genios®A "Chic"

Formes élégantes



NOUVEAUTÉ

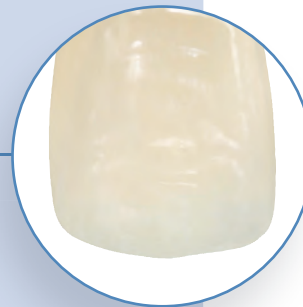


Bord incisif arrondi

Genios®A "Dynamique"

Occlusion « plus libre »












NOUVEAUTÉ

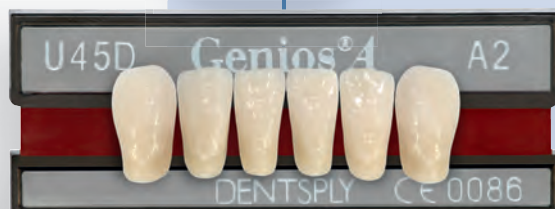

Bord incisif rectiligne

Genios® A Antérieures du haut

- Disponibles dans les teintes Vita* (A1-D4) et Bleach (BL1 et BL3).

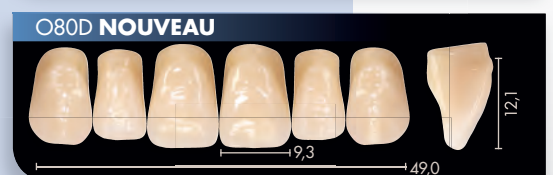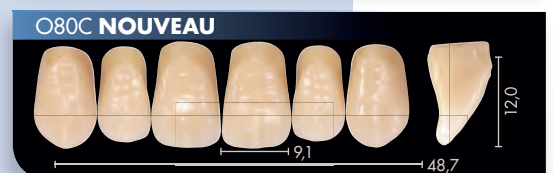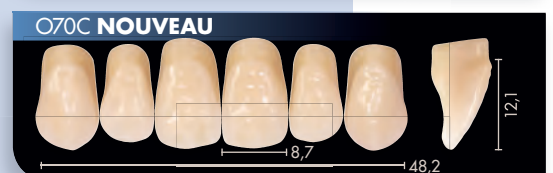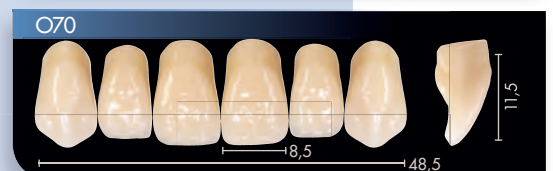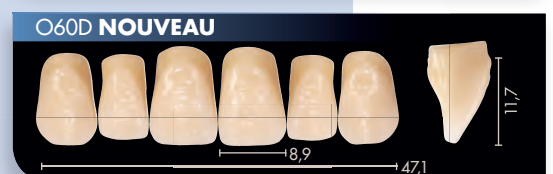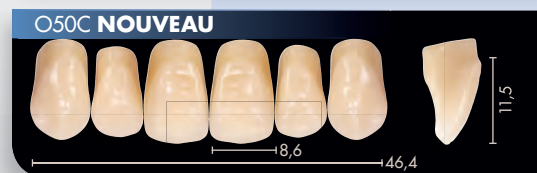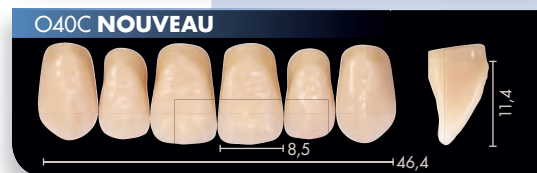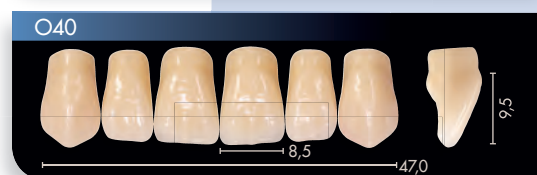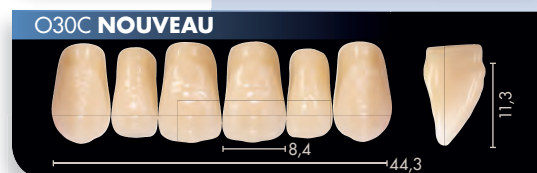

Genios®A Antérieures du bas

- Disponibles dans les teintes Vita* (A1-D4) et Bleach (BL1 et BL3).



* N'est pas une marque déposée par DENTSPLY International Corp.

Genios®P Postérieures

- Disponibles dans les teintes Vita* (A1-D4) et Bleach (BL1).

- Deux formes : Standard et Réduite (R)
Les formes réduites présentent exactement les mêmes dimensions que les formes standards à l'exception de leur partie basale qui est réduite.



Formes standards

31

34

36

Formes réduites (R)

—

34R

36R

Une variante (XL/XR)

Les prémolaires plus volumineuses (dimensions des molaires inchangées) facilitent la réalisation des prothèses partielles.

Formes standards (XL)

34XL

36XL

Formes réduites (XR)

34XR

36XR

Version classique (standard)



Genios® P34


Variante XL (standard)



Genios® P34XL

* N'est pas une marque déposée par DENTSPLY International Corp.

Version classique (standard et réduite R)

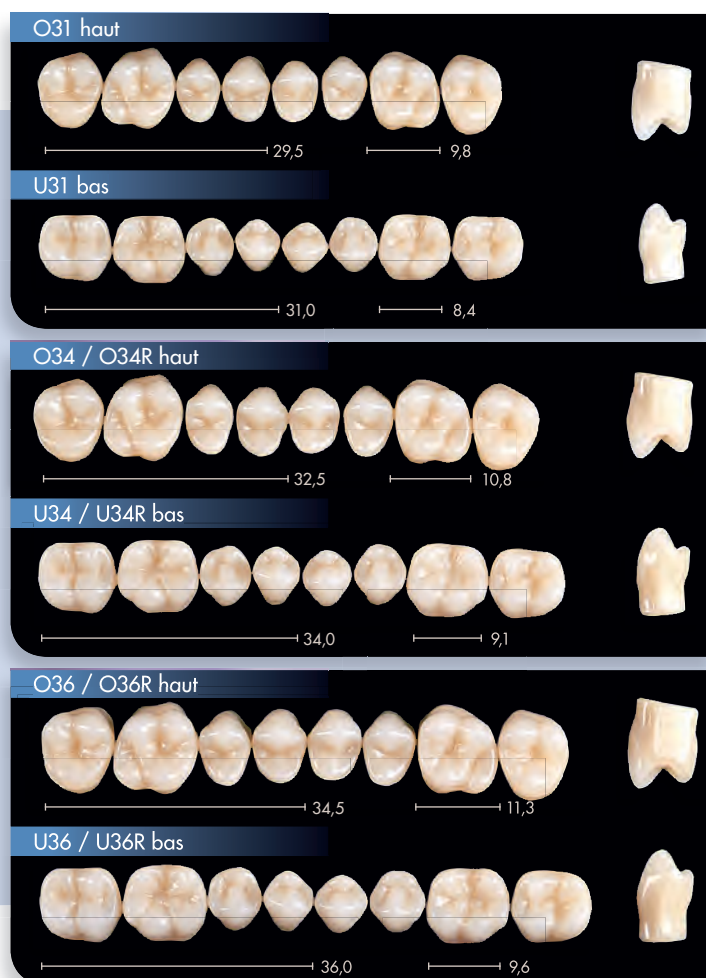

Variante XL (standard) et XR (réduite)



Tableau des combinaisons

Genios® A (Antérieures)		Genios® P (Postérieures)	
Formes haut	Formes bas	Formes haut	Formes bas
O10	U15, U25	O31	U31
O20	U25, U35	O31	U31
O30	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O30C	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O40	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O40C	U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U4XR
O50	U25, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O50C	U25, U35, U35C, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O60	U25, U35, U35C, U45, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O60C	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O60D	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O70	U35C, U45, U45C, U45D, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O70C	U35C, U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O80	U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O80C	U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL	U36, U36R, U36XL
O80D	U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O90	U55, U55C, U65	O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR

Teintier Genios®

avec ses 16 teintes Vita® (A1-D4) et teintes Bleach (BL1 et BL3).



Réf. Art. : D 01027510

* N'est pas une marque déposée par DENTSPLY International Corp.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. GENIOS®. Indications : dent IPN(r) destinée à la réalisation de prothèses adhésives. Classe / Organisme Certificateur : IIa / CE0086. Fabricant : DENTSPLY Trubyte York. Rev. Janvier 2015.

DENTSPLY France SAS | LABORATOIRE

4 rue Michael Faraday | 78180 Montigny le Bretonneux | Tél : 01 30 14 77 77

Plus d'infos, plus de nouveautés, sur www.dentsply.fr

For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire