



EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Spray

Désinfectant à action rapide,
sans alcool

- Convient parfaitement bien au plexiglas
- Action nettoyante supérieure
- Temps d'action réduit



Français

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Préparation sans alcool prête à l'emploi pour la désinfection et le nettoyage de l'inventaire médical, des dispositifs médicaux et des surfaces en tout genre. Convient tout particulièrement aux dispositifs et surfaces ne permettant pas l'utilisation d'alcool. À base de composés d'ammonium quaternaire EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Spray ne contient pas d'alcool, ni d'aldéhyde ni de phénols.

CHAMPS D'APPLICATION :

Selon directive dispositifs médicaux (DDM): Convient à la désinfection et au nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs sensibles à l'alcool.

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB): Convient à la désinfection et au nettoyage de tout type de surface sensible à l'alcool.

SPECTRE ET TEMPS D'ACTION :

Désinfection de surfaces (désinfection par essuyage), bactéricide, levuricide selon VAH: 1 min., efficace contre tous les virus enveloppés incl. VHB/VIH/VHC/virus de la vaccine/virus de la grippe selon la recommandation RKI : 30 sec.

MODE D'EMPLOI :


Humidifier intégralement les surfaces et les objets. Essuyer le cas échéant avec une lingette à usage unique à l'issue du temps d'action.

COMPOSITION :

100 g de liquide d'imprégnation contiennent : 0,5 g de chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium; 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium.

REMARQUE PARTICULIÈRE :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et l'emballage dans un centre agréé pour l'élimination des déchets ou dans les collecteurs municipaux.

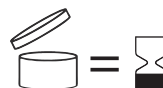



EuroSept® Plus Surface Disinfection non-alcoholic Spray

Désinfectant à action rapide,
sans alcool

- Convient parfaitement bien au plexiglas
- Action nettoyante supérieure
- Temps d'action réduit



Français

LISTES / STATUT DU PRODUIT :

- Enregistré comme produit biocide **auprès du BauA (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail) conformément à la loi sur les biocides : N° BAuA Reg. :**
- Conforme à la directive UE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

- REF **988-2672** Bouteille avec pistolet vaporisateur de 1 l
- REF **988-2673** Bidon de 5 l

ACCESSOIRES :

- REF **979-6277** Pistolet vaporisateur pour bouteille de 1 l
- REF **979-6276** Robinet de remplissage de bidon
- REF **979-6278** Clé de serrage pour bidon
- REF **979-6272** Pompe doseuse pour bidon de 5 l

 HENRY SCHEIN SERVICES GMBH
(manufacturer)
MONZASTRASSE 2A
D-63225 LANGEN, GERMANY
TEL: +49 6103 757 5000
WWW.HENRYSCHEINBRAND.COM
Distributed by (in US only)
HENRY SCHEIN INC.
135 DURYEA ROAD
MELVILLE, NY 11747 USA
Rev. 2017/11